

あなたの“欲しい”を、世界から



磁気カップリング式攪拌シール

マイティマグシール


高負荷対応攪拌棒のご紹介



従来の攪拌棒

- $\phi 8$ の攪拌棒を PTFE 製のスペーサーで締め付け
- PTFE は耐薬品性・耐熱性に優れる一方、変形しやすく滑りやすい


- ✕ 長期間の使用によりスペーサーが変形してしまい、いくら締め付けても攪拌棒が固定できない。
- ✕ 高温、高粘度の攪拌時に攪拌棒の保持が弱まり、フラスコ内で攪拌棒が滑ってしまう。

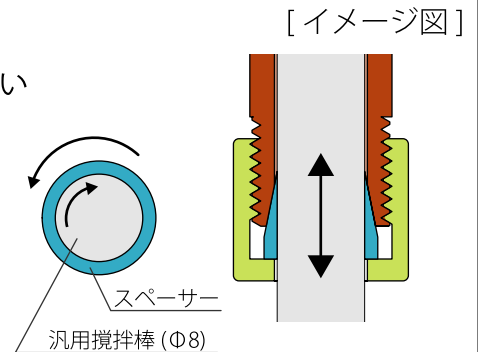

攪拌棒の固定でお困りの方へ
弊社独自製品のご紹介

高トルク、高信頼性への要求に応える新しい軸止め機構

高負荷対応攪拌棒

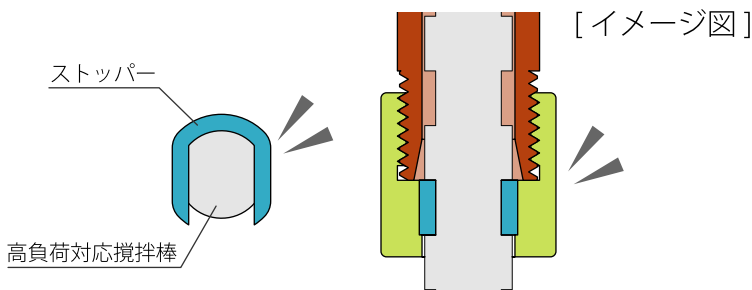

新開発の高負荷対応攪拌棒を使用することで、空回りを防止。
高温・長時間の攪拌にも安心です。

現在ご使用のマイティマグシールに高負荷対応攪拌棒 (HS-0-01~HS-0-05) と、取付セット (HS-1-01) を組み合わせてご使用ください。

攪拌中に攪拌棒が外れることが無いため、長時間の反応でも安心です。

5mm^{*} ~ 10mm 単位の長さ調整に対応。いつも同じ高さでの設定が容易です。
※HS-0-01 のみ

特許取得済み
第 5204344 号

U字型のストッパーが攪拌棒をがっちり保持。攪拌棒の空回りを防ぎます。



■価格表

※価格はすべて税抜

品番	品名		価格
HS-0-01	高負荷対応用	PTFE 製攪拌棒 110mm (200～500mL フラスコ向け)	¥21,500
HS-0-02	高負荷対応用	PTFE 製攪拌棒 175mm (500mL～1L フラスコ向け)	¥22,500
HS-0-03	高負荷対応用	PTFE 製攪拌棒 250mm (2～3L フラスコ向け)	¥23,500
HS-0-04	高負荷対応用	PTFE 製攪拌棒 320mm (5L フラスコ向け)	¥24,500
HS-0-05	高負荷対応用	PTFE 製攪拌棒 360mm (10L フラスコ向け)	¥25,500
HS-1-01	高負荷対応用	攪拌棒取付セット (キャップ、ストッパー)	¥4,000

※その他、径違いテーパージョイントや交換用部品も用意しております。詳しくは弊社ウェブサイトをご覧ください。




高負荷対応用
取付セット



フラスコのサイズはメーカー・製品により異なります。

フラスコの口から攪拌棒の末端までの長さは、**攪拌棒の長さ+10～70mm**が目安となります。

取付確認用の攪拌棒の貸し出しや、ご要望に応じた特注仕様品の製作も承っております。お気軽にお問い合わせください。

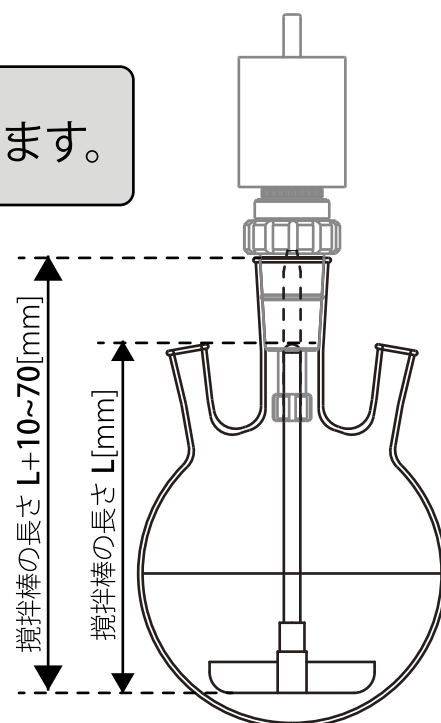

販売元

中村科学器械工業株式会社

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町18番10号
TEL:03-3661-4662 FAX:03-3661-0369
<http://www.globolab.jp>

代理店